

Endodontia

ENDO-MATE TC2 / ENDO-MATE DT / iPexII / Contra ângulo / Escarificadores



CREATE IT.

Índice

ENDO-MATE TC2 ----- P 03 - 04

ENDO-MATE DT ----- P 05 - 06

iPexII ----- P 07 - 08

Cabeças e Motores ----- P 09

Contra ângulos ----- P 10

Escarificadores ----- P 11 - 12

Reposições ----- P 13 - 14



ENDO-MATE TC2

Micromotor Endodontia Sem Fio

Mais Inteligente e Mais Seguro

Trabalhos mais inteligentes e seguros com a livre circulação

Um grande LCD, operação de 5 teclas simples e leve, peça de mão sem fio assegurar o uso fácil, mesmo durante os procedimentos endodônticos mais delicados. O Auto reverso e função de alarme avisa com um som audível para indicar que a carga está prestes a atingir o nível de torque pré-definido o que lhe permite um controle, mesmo antes do auto reverse ser aplicado. 5 programas de memória. TC2 suporta a maioria das principais marcas de limas Ni-Ti.



Cabeça mini e colo fino



Cabeça em miniatura permite o acesso a áreas difíceis de alcançar. Colo fino garante maior visibilidade.

Sem stress para mais conforto

Peça de mão sem fio oferece liberdade de movimento. O desenho leve e ergonômico.

Painel LCD

Painel LCD grande e botão de acesso rápido.

Função do programa

Definíveis do usuário 5 predefinições - velocidade, torque, relação de transmissão e modo reverso Auto. Configurações último programa podem ser memorizados quando a alimentação é ligada.



Velocidade de rotação

Torque

Relação

Adequado para a maioria das marcas de limas Ni-Ti

Seleção de fixação relação de transmissão aplica-se toda a rotação e torque.

Velocidade de Rotação (min ⁻¹)	Tranmissão	Nível de Torque (Ncm)
200 ~ 900	10 : 1	0,2 ~ 2,2
140 ~ 550	16 : 1	0,3 ~ 3,0
100 ~ 450	20 : 1	0,4 ~ 4,0


Segurança para o tratamento endodôntico delicado

Dinâmico Auto Reverso e função de alarme para os procedimentos endodônticos mais seguros. O circuito de realimentação de rotação mantém-se estável, mesmo quando se altera a carga do motor da peça de mão. Desliga-se automaticamente para melhorar a segurança e poupar energia. Função de calibração para velocidade de rotação e um torque mais preciso.

Esta função não pode absorver completamente a diferença individual da peça de mão real do motor e contra ângulo.

Dois sons diferentes de alarme garantem um tratamento seguro e eficaz

Alarme permite evitar que os operadores coloquem muita carga nas limas, diminuindo a fadiga do metal.

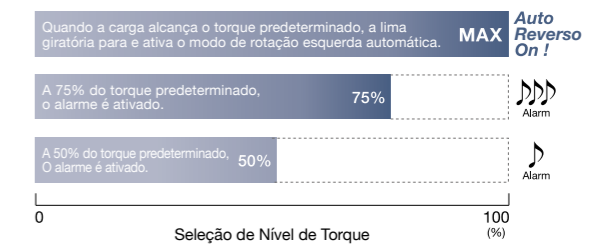

ENDO-MATE TC2 Conjuntos Completos

MODELO : ENDO-MATE TC2 (230 V) CÓDIGO DE ENCOMENDA : Y1001027

Inclui :

- Cabeça MP-F16R ● Motor ENDO-MATE TC2 ● Carregador de Baterias

ENDO-MATE TC2 Conjunto MPA completo

MODELO : ENDO-MATE TC2 MPA (230 V) CÓDIGO DE ENCOMENDA : Y1001028

Inclui :

- Cabeça MPA-F16R ● Motor ENDO-MATE TC2 ● Carregador de Baterias

Especificações :

- Faixa de velocidade : 2.000-9.000 min⁻¹
- Carregar : 1,5 h
- O uso contínuo : 1,2 h (Dependendo da carga de trabalho)



ENDO-MATE DT Micromotor endodôntico

Elegante e Portátil

ENDO-MATE DT é suficientemente inteligente para memorizar as seleções de velocidade e torque para mais de 9 limas Ni-Ti dos maiores fornecedores. Possui 3 modos de trabalho em reversão automática: reversão automática ligada e desligada, e parada automática. O motor reage quando a carga de trabalho alcança o nível de torque selecionado.

Com o botão de ligar/desligar, ele oferece flexibilidade de funcionamento sem pedal (pedal disponível opcionalmente), enquanto proporciona conveniência de portabilidade total com alimentação de energia de 2 vias, conexão direta a tomada ou mediante o uso de pilhas.



Transmissão	Velocidade de Rotação (min ⁻¹)
20 : 1	100-650
16 : 1	120-800
10 : 1	200-1.300
4 : 1	500-3.200
1 : 1	2.000 ~13.000

Suporta a maioria das principais marcas de limas NI-TI


Até 9 configurações (velocidade e torque, etc.) podem ser programados simplesmente pressionando o botão de função de memória. É fácil alternar entre cada programa predefinido que permite trabalhar com procedimentos necessários suportando a maioria das principais marcas de limas Ni-Ti.

Interruptor ON / OFF de 2 vias




A operação On / Off do micromotor é ativada por um interruptor de dedo no motor. Também há um controle de pedal opcional.

Leve, confortável e elegante peça de mão.

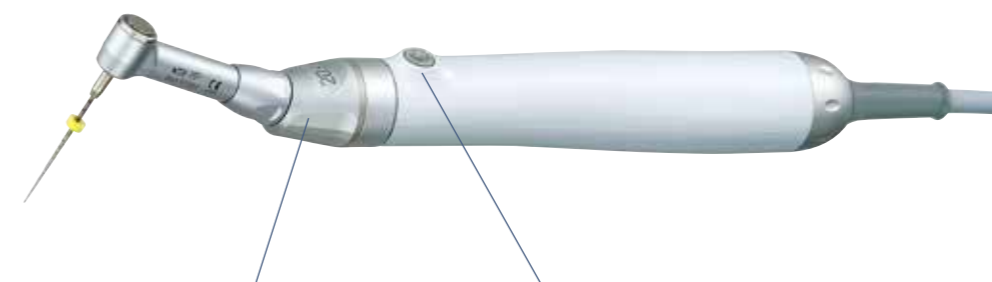

6 posições da cabeça para facilitar o tratamento

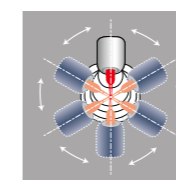

Dependendo da posição do local de tratamento, o ângulo da cabeça pode ser ajustado para obter o melhor ângulo.

2 modo ON / OFF interruptor

Características são :


- A: Aperte e solte
 - Micro Motor opera continuamente até o botão ser pressionado novamente.
- B: Pressione e segure
 - Micro Motor opera continuamente até o botão ser liberado.

Cabeça Ultra miniatura tipo Push Button

Permite a troca rápida e fácil de limas durante os procedimentos. Cabeça compacta oferece excelente visibilidade durante o tratamento.

Acoplamento rápido

Engate rápido permite a troca da cabeça fácil. Todas as cabeças são autoclaváveis até 135°C.

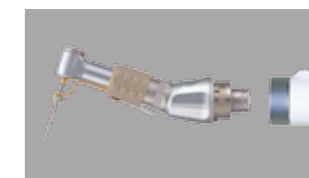

Função inversa Auto

A função de auto inversa activa quando o nível de torque pré-definido foi ultrapassado e pode ser configurado para operar no que se segue.

- modos:
- AUTO REVERSE** [Continuar automaticamente]
O motor retoma a rotação após auto reverso libertar a lima.
 - AUTO REVERSE** [Parar automaticamente]
O motor pára após a auto reverso libertar a lima.
 - Alternativamente, a função de auto reverso pode ser desativada.

ENDO-MATE DT com Cabeça 20:1

MODELO : ENDO-MATE DT (230 V) CÓDIGO DE ENCOMENDA : Y141121

- Inclui :
- Unidade de Controle ● Motor e cabo ● Cabeça MP-F20R (20:1)
 - Suporte de Peça de Mão ● Adaptador CA

ENDO-MATE DT sem Cabeça

MODELO : ENDO-MATE DT W/O (230 V) CÓDIGO DE ENCOMENDA : Y141124

- Inclui :
- Unidade de Controle ● Motor e cabo ● Suporte de Peça de Mão ● Adaptador CA

Especificações :

- Fonte de alimentação : CA 230 V 50/60 Hz e pacote de bateria
- Número de programas : 9 • Torque Máx. : 7 Ncm (quando utilizar uma cabeça 20:1)
- Variação de velocidades : 100-13.000 min⁻¹ (Com cabeças de transmissão 20:1, 4:1, 1:1)
- Recarga / Uso contínuo : 5 h / 2 h (conforme a carga de trabalho)
- Dimensões : L 92 x C 148 x Al 124 (mm) • Peso : Unidade de controle 456 g / Peça de mão motor e cabo 92 g



iPexII

Localizador Apical Avançado

Usando como base os resultados de diversos testes clínicos e testes de verificação, a NSK criou o **SmartLogic**, um localizador de ápice de nova geração compatível com diferentes perfis de dentes e que oferece uma grande exatidão na detecção do ápice radicular. Ao chegar ao ponto biologicamente crucial, que é o ápice radicular (a zona de pressão). É capaz de proporcionar uma imagem clara e precisa da localização da ponta da lima no seu grande ecrã LCD.

Características

- Medição do canal radicular de grande precisão graças ao **SmartLogic**.
- Detecção automática do ápice com exatidão tanto em seco como em molhado.
- Desenho compacto e elegante que ocupa pouco espaço. Inclusive é possível colocá-lo na bandeja do equipamento dental.
- Três sons de alerta diferentes conforme a localização da ponta da lima, o que garante a precisão nos procedimentos.
- Um grande ecrã LCD tricolor pouco refletiva permite aos profissionais controlar de maneira precisa e instantânea o progresso do procedimento.
- Economia de energia e baixos custos de funcionamento.




Controlador **SmartLogic** de Nova Geração

O controlador **SmartLogic** da NSK combina duas avançadas tecnologias para analisar os sinais com precisão. A tecnologia **SmartLogic** do iPexII elimina praticamente todas as interferências no sinal do canal radicular para detectar a localização exata do ápice.


- O iPexII **SmartLogic** alterna entre duas frequências diferentes para realizar as medições. Ao reduzir o ruído que interfere com as análises de sinal, gera um sistema de ondas de grande precisão, o qual não precisa de circuito de filtragem.
- O iPexII **SmartLogic** usa o sistema de ondas em sua totalidade para analisar a frequência extraída. Isso produz uma análise de medições constantes, incluindo as diferentes condições do canal radicular, mantendo ao mesmo tempo um controle constante do progresso da inserção da lima.

Ecrã LCD tricolor


▶ Início da medição

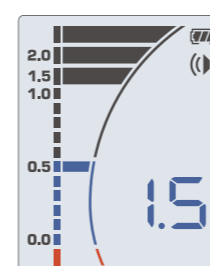


▶ Zona do ápice radicular

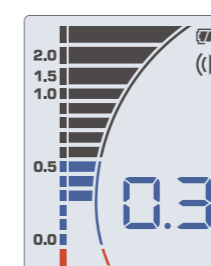

▶ Chegada ao ápice

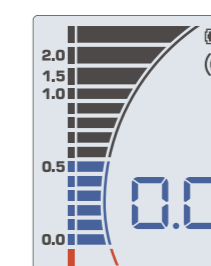

▶ Superação do ápice

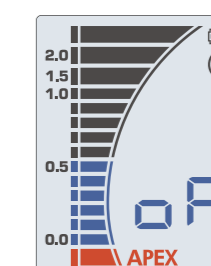

Controle de Profundidade de Canal

Para integração com instrumentos de Endodontia (ENDO-MATE TC2 / ENDO-MATE DT / Contra ângulo) Os produtos de endodontia da NSK e iPexII garantem procedimentos de condução radicular seguros, precisos e eficientes.



iPexII Conjunto Completo

MODELO : **iPexII CONJUNTO COMPLETO**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y1002208**

Inclui :

- Unidade de controle ● Sonda iPexII (1,8 m)
- Pinça para lima iPexII (3 unidades) ● Gancho labial (3 unidades)
- Pilhas secas de magnésio AAA (3 unidades) ● Testador de iPexII

Especificações :

- Alimentação : 3 pilhas de 1,5 V AAA (LR03 ou R03)
- Uso contínuo : Aprox. 60 horas
- Dimensões : L 60 x C 60 x AI 86 (mm)
- Peso : Unidad 76 g (sin pilas)



ENDO-MATE TC2 / ENDO-MATE DT Cabeça e Motores

Cabeças para a Aplicação Endodôntica

- 20 : 1 MODELO : **MP-F20R** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y110044**
- 16 : 1 MODELO : **MP-F16R** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y110096**
- 10 : 1 MODELO : **MP-F10R** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y110048**

- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Cabeça Mini
- Rotação de 360°
- Porta-limas Push Botton



- 20 : 1 MODELO : **MPAS-F20R** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y110046**
- 16 : 1 MODELO : **MPAS-F16R** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y110098**

- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Cabeça Mini
- Rotação de 360° Conexão para Localizador apical (Para mandril curto)
- Porta-limas Push Botton



Motores

MODELO : **ENDO-MATE TC2 Motor**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **E346**

- Velocidade do Motor : 2.000-9.000 min⁻¹
- Controle de Torque
- Reverso Auto



MODELO : **ENDO-MATE DT Motor e cabo**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **E275**




Capacidade para Localizador de Ápice

Cabeças MPA e MPAS estão equipados com anel sonda que permitem usar seu localizador Apex com os sistemas ENDO-MATE TC2 e DT. Ao combinar uma cabeça localizadora com ENDO-MATE TC2 e DT de NSK, os profissionais serão capazes de executar preparações de canais radiculares mais precisos. Todas as cabeças contra ângulo são autoclaváveis até 135°C.

2 tipos de suportes de limas estão disponíveis relevantes para o comprimento do cabo da lima selecionado.



Instale o Monitor do Localizador de Ápice movendo-o adiante para que entre em contato com a lima. Desinstale separando-o da lima.

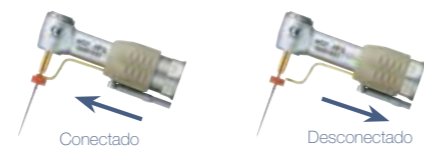

Contra ângulos Endodônticos

SÉRIE Ti-Max X



Redução 10:1

- COM LUZ** MODELO : **X35L** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **C620**
- SEM LUZ** MODELO : **X35** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **C624**

- Velocidade Máxima: 4.000 min⁻¹
- Para lima de mão e lima de motor
- Giro de 60°
- Corpo de Titânio com DURACOAT Resistente a Arranhões
- Porta-limas Push Botton
- Spray Simples
- Microfiltro
- Óptica de Vidro Celular



MODELO : **QF Adaptor**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **C87701**

SÉRIE FX

Spray de Água Externo



Redução 16:1

- SEM LUZ** MODELO : **FX75m** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **C1055001**

- Velocidade Máxima: 2.300 min⁻¹
- Para limas de motor
- Corpo de Aço Inoxidável
- Rotação de 360°
- Porta-limas Push Botton
- Cabeça Mini

SÉRIE EX

Spray de Água Externo



Redução 64:1

- SEM LUZ** MODELO : **MPA-ER64** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y110144**
- SEM LUZ** MODELO : **MPA-ER64M** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y110184**

- Velocidade Máxima: 625 min⁻¹
- Conexão para Localizador de Ápice (para mandril longo)
- Cabeça Mini
- Para limas de motor
- Rotação de 360°
- Porta-limas Push Botton

Lavável em termodesinfetante
(Excluír ENDO-MATE TC2 Motor, ENDO-MATE DT Motor e cabo e MPA-ER64)

Esterilizável em autoclave até 135°C

Escarificador Ultrassônico

Varios 970

COM LUZ MODELO : **VA970 LUX (230 V)** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y1001168**

SEM LUZ MODELO : **VA970 (230 V)** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y1001175**

Inclui :

- Unidade de controle ● Peça de mão ● Cabo de peça de mão ● 3 pontas de escarificação (G4, G6, G8)
- Pedal de controle (FC-70) ● 2 Recipientes de Irrigação ● 3 Chaves com Torquímetro para Pontas
- Cabo AC e fonte de energia ● Caixa para esterilização



Endodontia

NSK Satelec

MODELO : **E4**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Z217428**

- Para limpeza do canal radicular



NSK Satelec

MODELO : **E4D**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Z217528**

- Revestimento de diamante
- Para ampliação do canal radicular



NSK Satelec

MODELO : **E5**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Z217305**

- Não precisa de água
- Para condensação lateral



NSK Satelec

MODELO : **E6**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Z217306**

- Não precisa de água
- Para condensação lateral



NSK Satelec

MODELO : **E7**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Z217307**

- Não precisa de água
- Para remoção de obturações e materiais estranhos



NSK Satelec

MODELO : **E7D**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Z217317**

- Revestimento de diamante
- Para ampliação do canal radicular



NSK Satelec

MODELO : **E8**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Z217308**

- Não precisa de água
- Remoção de obturações e materiais estranhos



NSK Satelec

MODELO : **E8D**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Z217318**

- Revestimento de diamante
- Para ampliação do canal radicular



NSK Satelec

MODELO : **E15D**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Z217319**

- Revestimento de diamante
- Para localização do canal radicular



NSK Satelec

MODELO : **E11**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Z217031**

- Para limas U (ø0,8 mm) ● Para limpeza do canal radicular
- Para dentes anteriores ● Suporte angulado em 120° para limas U



NSK Satelec

MODELO : **E12**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Z217032**

- Para limas U (ø0,8 mm) ● Para limpeza do canal radicular
- Para dentes posteriores ● Suporte angulado em 95° para limas U



MODELO : **U files 33 mm / #15**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y900062**

- ISO 15 ● Conjunto de 6



MODELO : **U files 33 mm / #20**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y900063**

- ISO 20 ● Conjunto de 6



MODELO : **U files 33 mm / #25**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y900064**

- ISO 25 ● Conjunto de 6



MODELO : **U files 33 mm / #30**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y900065**

- ISO 30 ● Conjunto de 6



MODELO : **U files 33 mm / #35**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y900066**

- ISO 35 ● Conjunto de 6



Retrógrado Endo

NSK Satelec

MODELO : **E30RD**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Z217212**

- Revestimento de diamante
- Para dentes posteriores (em ângulo direito)



NSK Satelec

MODELO : **E30LD**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Z217213**

- Revestimento de diamante
- Para dentes posteriores (em ângulo esquerdo)



NSK Satelec

MODELO : **E31D**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Z217210**

- Revestimento de diamante
- Para dentes anteriores e posteriores (70°)



NSK Satelec

MODELO : **E32D**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Z217211**

- Revestimento de diamante
- Para dentes anteriores (90°)



Endodontia Pontas V

NSK Satelec

MODELO : **V30** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Z217030**

- Inclui chave de substituição E-Tip
- Suporte de Pontas V ● A ponta é opcional



MODELO : **V-S50** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y900169**

- Para limpeza do canal radicular 17 mm
- Conjunto de 3




MODELO : **V-S51** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y900170**

- Para limpeza do canal radicular 23 mm
- Conjunto de 3




MODELO : **V-S52** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y900171**

- Para limpeza do canal radicular 26 mm
- Conjunto de 3

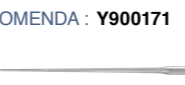


MODELO : **V-S53** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y900172**

- Para limpeza do canal radicular 32 mm
- Conjunto de 3

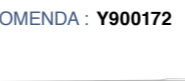


MODELO : **V-S50D** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y900173**

- Revestimento de diamante
- Para ampliação do canal radicular 17 mm
- Conjunto de 3

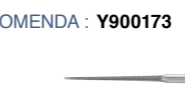


MODELO : **V-S51D** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y900174**

- Revestimento de diamante
- Para ampliação do canal radicular 23 mm
- Conjunto de 3

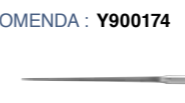

MODELO : **V-S52D** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y900175**

- Revestimento de diamante
- Para ampliação do canal radicular 26 mm
- Conjunto de 3

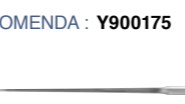

MODELO : **V-S53D** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y900176**

- Revestimento de diamante
- Para ampliação do canal radicular 32 mm
- Conjunto de 3



1,0 ✖ Para reduzir a incidência de deformação de pontas, a mesma não está coberta com diamante. (1,0 mm)

Cada pacote de E11, E12 ou V30 inclui uma chave E para troca de ponta. A chave de troca não é incluída quando é feito pedido de outras pontas. Faça o pedido da chave de troca separadamente neste caso.

Escarificador Pneumático



COM LUZ MODELO : **S970L** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **T1005**

SEM LUZ MODELO : **S970** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **T1020**

- Corpo Titânio resistente a arranhões DURACOAT ● Óptica de vidro celular
- Anel com 3 níveis de potência ● Frequência de oscilação : 5.800-6.200 Hz
- Inclui 3 pontas (S1, S2 & S3), Chave para pontas (CR-20) Protetor de pontas (L)

Endodontia Pontas V

MODELO : **S75** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Z252035**

- Inclui chave de substituição E-Tip
- Suporte de Pontas V ● A ponta é opcional




MODELO : **V-U15** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y900177**

- Lima-V Irrigação 23 mm # 15 ● ISO 15
- Conjunto de 6




MODELO : **V-U20** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y900178**

- Lima-V Irrigação 23 mm # 20 ● ISO 20
- Conjunto de 6

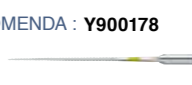


MODELO : **V-U25** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y900179**

- Lima-V Irrigação 23 mm # 25 ● ISO 25
- Conjunto de 6

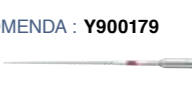

MODELO : **V-U30** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y900180**

- Lima-V Irrigação 23 mm # 30 ● ISO 30
- Conjunto de 6

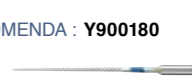


MODELO : **V-U35** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y900181**

- Lima-V Irrigação 23 mm # 35 ● ISO 35
- Conjunto de 6




MODELO : **V-N50** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y900182**

- Ni-Ti Irrigação 17 mm ● Conjunto de 3

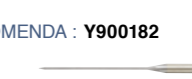

MODELO : **V-N51** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **Y900183**

- Ni-Ti Irrigação 21 mm ● Conjunto de 3

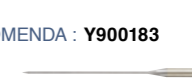

ENDO-MATE TC2 / ENDO-MATE DT Cabeças e Engrenagens

Cabeças para a Aplicação Endodontia

MODELO : **MP-Y** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **C547**

- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Cabeça Mini
- Rotacao de 360°
- Porta-limas Push Botton



MODELO : **MPA-Y** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **C548**

- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Cabeça Mini
- Rotacao de 360°
- Porta-limas Push Botton
- Conexao para Localizador apical (Para cabo longo)



MODELO : **MPAS-Y** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **C882**

- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Cabeça Mini
- Rotacao de 360°
- Porta-limas Push Botton
- Conexao para Localizador apical (Para cabo curto)



MODELO : **NML-Y** CÓDIGO DE ENCOMENDA : **C874**

- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Cabeça Mini
- Rotacao de 360°
- Tipo de Trava



Engrenagens

MODELO : **FC**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **C873**

- Velocidade Direta 1:1



MODELO : **F4R**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **C872**

- Redução 4:1



MODELO : **F10R**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **C398**

- Redução 10:1



MODELO : **F16R**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **C871**

- Redução 16:1



MODELO : **F20R**
CÓDIGO DE ENCOMENDA : **C399**

- Redução 20:1



Reposições

ENDO-MATE TC2

MODELO	PRODUTO	CODIGO DE ENCOMENDA
Pilhas Recarregaveis Ni-MH (conjunto de 2)		Y900103
Carregador de Baterias		U614

* Use somente pilhas recarregaveis tamanho AAA de Ni-MH (Hidreto Metal Niquel) Nunca tente usar pilhas que não são recarregaveis.

MODELO	PRODUTO	CODIGO DE ENCOMENDA
Cabo de Fonte de Energia		U439550
Cabo Para MPA / MPAS		C876021

MODELO	PRODUTO	CODIGO DE ENCOMENDA
Grampo de Cabo de conexao		C876509

ENDO-MATE DT

MODELO	PRODUTO	CODIGO DE ENCOMENDA
ENDO-MATE DT Unidade		U421002
Adaptador ENDO-MATE DT		U480
Suporte de Peca de Mao		Z095206

MODELO	PRODUTO	CODIGO DE ENCOMENDA
Cabo Para MPA / MPAS		C876021
Grampo de Cabo de conexao		C876509

MODELO	PRODUTO	CODIGO DE ENCOMENDA
Pilhas Recarregaveis		U421070
FC-15 Pedal de controle		Z248


iPexII

MODELO	PRODUTO	CODIGO DE ENCOMENDA
Pinca para lima iPexII		U1109351
Testador de iPexII		U1109353

MODELO	PRODUTO	CODIGO DE ENCOMENDA
Sonda iPexII		U1109352
Gancho labial		U501513

Série FX / EX

MODELO	PRODUTO	CODIGO DE ENCOMENDA
Tubo (RSM)		Z166101

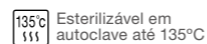

NAKANISHI INC. www.nsk-inc.com

700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es

C/ Módena, 43 El Soho-Európolis, 28232 Las Rozas, Madrid, Spain
TEL : +34 91 626 61 28 FAX : +34 91 626 61 32

As especificações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

ENDO-MATE TC2

ENDO-MATE DT

iPexII

Contra ângulos

Escarificadores

Reposições