

NSK
CREATE IT.

Turbina e Contra-Ângulo
Série S-Max M

NOVA

A série M de classe mundial é o próximo salto em frente.

NEXT STAGE

A série M S-Max é a próxima fase de evolução das nossas peças de mão mundialmente aclamadas. Estes novos modelos são a incorporação da experiência da NSK em peças de mão.

A série M oferece a fiabilidade e segurança exigidas tanto pelos profissionais como pelas normas em constante mudança da indústria dos instrumentos dentários. Os modelos mais vendidos da NSK são a sua melhor opção.



Contra-ângulo

ROBUSTEZ

Os contra-ângulos da série S-Max M aumentaram drasticamente a durabilidade e têm um design do corpo interno e um mecanismo de mandril atualizados. São a norma da nova geração da NSK - a junção de uma sofisticação ergonômica com uma sensação de corte suave. Experimente-os.

DURABILIDADE

Conceção atualizada do corpo interno

O totalmente novo design interno dá-lhe uma duração ainda maior e pode suportar a esterilização repetida em autoclave e o ambiente hostil da desinfecção térmica.

Sistema de Cabeça Limpa

O sistema de cabeça limpa tem um mecanismo anti-sucção que impede que o sangue e os materiais estranhos entrem na cabeça a partir da cavidade oral. Como resultado, os rolamentos de esferas e as peças mecânicas têm uma maior duração.

Rolamentos de Cerâmica

Os rolamentos cerâmicos são 25% mais duros do que o aço mas têm apenas cerca de metade do peso, o que faz com que tenham muito pouco desgaste, fazendo com que o cartucho dure mais tempo.

Corpo totalmente em aço inoxidável

O corpo da peça de mão é em aço inoxidável, sendo assim à prova de corrosão e muito robusto. O seu acabamento acetinado adapta-se confortavelmente à sua mão.



USABILIDADE

Um novo mecanismo de mandril proporciona uma força de retenção ainda maior

O mecanismo do mandril que retém a broca foi atualizado para aumentar ainda mais a segurança do operador e do paciente. E, sendo fácil de utilizar, pode concentrar-se totalmente no tratamento.

Sistema de Fixação da Broca Push Button

A broca é libertada facilmente com um botão de pressão tátil com resposta rápida.

Forma mais elegante

A pega foi adelgada em resposta a pedidos de um design que evitasse o contacto com os dentes ao fazer uma aproximação aos molares.

Quatro Sprays

Pulveriza de um modo mais eficaz sobre toda a broca para um melhor arrefecimento. *Apenas M95L/M95

LINHA DE PRODUTOS



Multiplicador 1:5

COM LUZ MODELO: **M95L** CÓDIGO DE ENCOMENDA: **C1023**

SEM LUZ MODELO: **M95** CÓDIGO DE ENCOMENDA: **C1026**



- Velocidade Máxima : 200.000 min⁻¹
- Tamanho da Cabeça : ø9,9 x Al 14,5 mm
- Para brocas FG (ø1,6)
- Corpo de Aço Inoxidável
- Sistema de Fixação da Broca Push Botton
- Rolamentos de Cerâmica
- Quatro Sprays
- Sistema Anti-aquecimento
- Sistema de Cabeça Limpa
- Óptica de Vidro Celular



Redução 4:1

COM LUZ MODELO: **M15L** CÓDIGO DE ENCOMENDA: **C1025**

SEM LUZ MODELO: **M15** CÓDIGO DE ENCOMENDA: **C1028**



- Velocidade Máxima : 10.000 min⁻¹
- Tamanho da Cabeça : ø9,6 x Al 13,4 mm
- Para brocas CA (ø2,35)
- Corpo de Aço Inoxidável
- Sistema de Fixação da Broca Push Botton
- Spray Simples
- Sistema de Cabeça Limpa
- Óptica de Vidro Celular



Velocidade Direta 1:1

COM LUZ MODELO: **M25L** CÓDIGO DE ENCOMENDA: **C1024**

SEM LUZ MODELO: **M25** CÓDIGO DE ENCOMENDA: **C1027**



- Velocidade Máxima : 40.000 min⁻¹
- Tamanho da Cabeça : ø9,6 x Al 13,4 mm
- Para brocas CA (ø2,35)
- Corpo de Aço Inoxidável
- Sistema de Fixação da Broca Push Botton
- Spray Simples
- Sistema de Cabeça Limpa
- Óptica de Vidro Celular



Peça de Mão Reta

Velocidade Direta 1:1

SEM LUZ MODELO: **M65** CÓDIGO DE ENCOMENDA: **H1008**



- Velocidade Máxima : 40.000 min⁻¹
 - Para brocas HP (ø2,35)
 - Para brocas CA (ø2,35)*
 - Corpo de Aço Inoxidável
 - Spray Simples
 - Sistema de Cabeça Limpa
- *Necessita inserir o topo da broca, facilitado com a peça de mão

Turbina pneumática

A MAIS FORTE


A forma do novo rotor foi desenvolvida utilizando uma avançada simulação computadorizada e software de análise de fluidos.

Este rotor proporciona um aumento significativo de 6W na potência, que passou de 20W para 26W.

A peça de mão torna-se uma extensão do operador e proporciona uma sensação de corte que facilita as operações mais intrincadas.

A sua forma elegante e fina é o resultado da experiência e tecnologia acumuladas ao longo de décadas pelos especialistas em peças de mão da NSK.


MAIS POTENTE

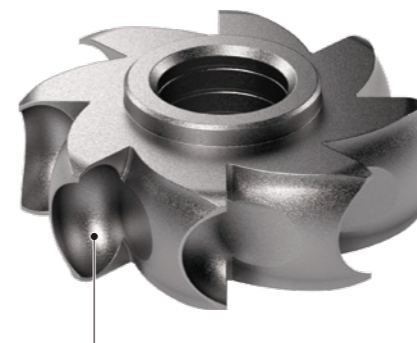

O novo design do rotor foi otimizado utilizando uma simulação de fluxo de ar rotativo, resultando numa alta potência de 26W pela utilização eficiente da energia do abastecimento de ar.

Alta potência de 26W

A estrutura interna foi completamente redesenhada para obter uma maior redução do ruído e vibrações, incluindo o novo rotor de alta potência de 26W.

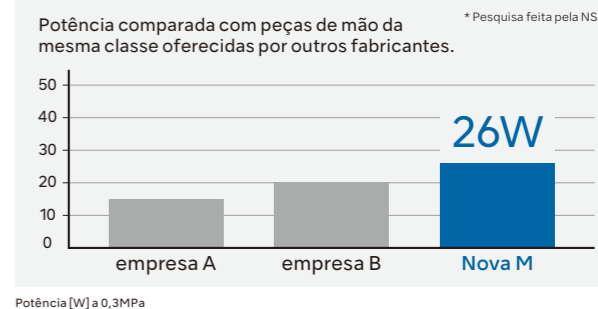

DURABILIDADE

Corpo totalmente em aço inoxidável

O corpo da peça de mão é em aço inoxidável, sendo assim à prova de corrosão e muito robusto. O seu acabamento acetinado adapta-se confortavelmente à sua mão.

Rolamentos de Cerâmica

Os rolamentos cerâmicos são 25% mais duros do que o aço mas têm apenas cerca de metade do peso, o que faz com que tenham muito pouco desgaste, fazendo com que o cartucho dure mais tempo.

Sistema de Cabeça Limpa

O sistema de cabeça limpa tem um mecanismo anti-sucção que impede que o sangue e os materiais estranhos entrem na cabeça a partir da cavidade oral. Como resultado, os rolamentos de esferas e as peças mecânicas têm uma maior duração.

USABILIDADE

Facilidade para mudar o cartucho

A peça de mão foi concebida com uma cápsula tipo cartucho. O cartucho é fácil de substituir. A mudança do cartucho também elimina os bloqueios por água.

Quatro Sprays

Pulveriza de um modo mais eficaz sobre toda a broca para um melhor arrefecimento.

Mandril com botão de pressão

A broca é libertada facilmente com um botão de pressão tátil com resposta rápida.

LINHA DE PRODUTOS

Cabeça Standard



Acoplamentos NSK

COM LUZ MODELO: **M900L** CÓDIGO DE ENCOMENDA: **P1254**
SEM LUZ MODELO: **M900** CÓDIGO DE ENCOMENDA: **P1256**



- Potência: 26 W ● Velocidade: 325.000-430.000 min⁻¹ ● Tamanho da Cabeça: ø12,1 x Al 13,3 mm ● Corpo de Aço Inoxidável ● Rolamentos de Cerâmica
- Sistema de Fixação da Broca Push Botton ● Sistema de Cabeça Limpa ● Óptica de Vidro Celular ● Facilidade para mudar o cartucho ● Quatro Sprays

Cabeça Mini



Acoplamentos NSK

COM LUZ MODELO: **M800L** CÓDIGO DE ENCOMENDA: **P1253**
SEM LUZ MODELO: **M800** CÓDIGO DE ENCOMENDA: **P1255**



- Potência: 23 W ● Velocidade: 380.000-450.000 min⁻¹ ● Tamanho da Cabeça: ø10,6 x Al 12,4 mm ● Corpo de Aço Inoxidável ● Rolamentos de Cerâmica
- Sistema de Fixação da Broca Push Botton ● Sistema de Cabeça Limpa ● Óptica de Vidro Celular ● Facilidade para mudar o cartucho ● Quatro Sprays



Acoplamentos KaVo® MULTiflex®

COM LUZ MODELO: **M900KL** CÓDIGO DE ENCOMENDA: **P1258**
SEM LUZ MODELO: **M900K** CÓDIGO DE ENCOMENDA: **P1259**



- Potência: 26 W ● Velocidade: 325.000-430.000 min⁻¹ ● Tamanho da Cabeça: ø12,1 x Al 13,3 mm ● Corpo de Aço Inoxidável ● Rolamentos de Cerâmica
- Sistema de Fixação da Broca Push Botton ● Sistema de Cabeça Limpa ● Óptica de Vidro Celular ● Facilidade para mudar o cartucho ● Quatro Sprays



Acoplamentos KaVo® MULTiflex®

COM LUZ MODELO: **M800KL** CÓDIGO DE ENCOMENDA: **P1257**



- Potência: 23 W ● Velocidade: 380.000-450.000 min⁻¹ ● Tamanho da Cabeça: ø10,6 x Al 12,4 mm ● Corpo de Aço Inoxidável ● Rolamentos de Cerâmica
- Sistema de Fixação da Broca Push Botton ● Sistema de Cabeça Limpa ● Óptica de Vidro Celular ● Facilidade para mudar o cartucho ● Quatro Sprays

OPÇÕES DE ACOPLAMENTO

Acoplamento		NSK (Com Luz)	NSK (Sem Luz)	KaVo® (Com Luz)	KaVo® (Sem Luz)	W&H® (Com Luz)	W&H® (Sem Luz)	Sirona® (Com Luz)	Bien-Air® (Com Luz)
Cabeça Standard	MODELO	M900L	M900	M900KL	M900K	M900WL*	M900W	M900SL	M900BL*
	CÓDIGO DE ENCOMENDA	P1254	P1256	P1258	P1259	P1266	P1287	P1262	P1264
Cabeça Mini	MODELO	M800L	M800	M800KL	-	M800WL*	-	M800SL	M800BL*
	CÓDIGO DE ENCOMENDA	P1253	P1255	P1257	-	P1265	-	P1261	P1263

*Com luz LED no instrumento

REPOSIÇÕES

MODELO	PRODUTO	CÓDIGO DE ENCOMENDA	MODELO	PRODUTO	CÓDIGO DE ENCOMENDA	MODELO	PRODUTO	CÓDIGO DE ENCOMENDA
SX-SU03	Rotor para Cabeça Standard	P1281	SX-SU04	Tampa para Cabeça Standard	P1027500	Juntas "O" PTL (conjunto de 5)		Y900580
SX-MU03	Rotor para Cabeça Mini	P1280	SX-MU04	Tampa para Cabeça Mini	P1001500	SX-SU05	Chave de tampa para Cabeça Mini e Standard	20000535

KaVo® e MULTiflex® LUX são marcas comerciais registradas da Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.
 Sirona® é uma marca comercial registrada da Sirona Dental Systems GmbH.
 W&H® é uma marca comercial registrada da W&H Dentalwerk Burmoos GmbH.
 Bien-Air® e Unifix® são marcas comerciais registradas da Bien-Air Dental S.A.

Lavável em termodesinfetante Esterilizável com autoclave até 135°C