



CREATE IT.

# Mobiele Tandheekunde

Dentalone / VIVAMATE G5



## Geavanceerde tandheelkunde voor iedereen.

Uiteraard kan tandbederf worden behandeld. Maar zelfs vandaag nog zijn er mensen die geen toegang hebben tot tandverzorging. In sommige gebieden zijn er wel tandartsen maar is het niet altijd eenvoudig om hen in de kliniek op te zoeken. Vooral oudere en minder mobiele mensen hebben met dit probleem te kampen. NSK heeft een mobiele behandelingseenheid ontworpen die als een kliniek fungeert en patiënten, ongeacht hun locatie, van geavanceerde tandverzorging voorziet. De mobiele tandheelkundige eenheid van NSK is ontstaan uit verschillende innovatieve ideeën en opent de weg naar een nieuw tandverzorgingsmodel.

## Index

Dentalone .....	P 03-04
VIVAMATE G5 .....	P 05-06
Gerelateerde Producten .....	P 07-08
Reserveonderdelen .....	P 09



# Dentalone

De Mobiele Tandheelkundige Unit

## Helpen Kan Nu Overal.\*

Dentalone is de mobiele tandheelkundige unit die kan gebruikt worden bij humanitaire acties, in verzorgingstehuizen, scholen, leger en hospitalen.

### Voordelen

- Compact
- Eenvoudig in gebruik
- Mobiel
- Plug and Play systeem
- Gemakkelijk te verplaatsen
- Gebruiksvriendelijk
- Uitschuifbaar tot Cart functie
- Talrijke functies

### Kenmerken

- Alle componenten kunnen opgeborgen worden in een koffer met handvat
- De instrumentdrager met controleunit is in hoogte verstelbaar
- Kleine en Lichte Complete Unit
- Instrumentdrager met automatische selectie
- Geïntegreerde compressor voor irrigatie en spuit
- Voltage aanpasbaar (100 V- 230 V)



### NLX nano

Electrische Micromotor

- Korter en lichter (nu beschikbaar)



### Varios2 Lux

Multifunctionele Ultrasonische Scaler

- iPiezo motor levert stabiele krachtontwikkeling en prestaties



### Multi Pad

Multi Controle Paneel voor inbouwsysteem

- Visuele identificatie van de parameters is mogelijk bij gebruik van de instrumenten.

- Verlicht LCD controlepaneel
- 40.000 min<sup>-1</sup> Autoclaveerbare borstelloze NLX nano micromotor met LED verlichting, interne spray en titanium behuizing
- Geïntegreerde multifunctionele scaler Varios 170 met LED verlichting, slank en licht VA2-LUX-HP handstuk
- Multifunctionele spuit met LED licht
- Volledige speekselafzuiging
- 500 mL water container
- 1 liter afvoer container



## Dentalone Complete Set


MODEL : Dentalone REF : S9070

### Inhoud :

- 1 koffer op rollen ● 1 watercontainer voor spray ● 1 watercontainer voor afvoer ● Ingebouwde compressor
- Ingebouwde pomp voor afzuiging ● 1 voetpedaal ● 1 uitschuifbaar tablet

### Specificaties :

Afmetingen		
• Koffer zonder uitgeschoven handvat	: B 351 x D 405 x H 545 mm	• Werkhoogte : 766 mm
• Koffer met uitgeschoven handvat	: B 351 x D 405 x H 1.075 mm	• Gewicht met koffer : 18,5 kg
• Zonder koffer	: B 350 x D 405 x H 496 mm	• Voeding : AC 100-230 V 50/60Hz

 \*Elektriciteitsvoorziening vereist

# VIVAMATE G5

Draagbare Unit met micromotor

## Draagbare LED micromotor; Van aanpassing van protheses tot algemene toepassingen

Als nieuwste lid van de units voor mobiele tandheelkunde biedt VIVAMATE G5 talrijke functies die tegemoet komen aan de eisen voor mobiele tandheelkunde. De nieuwe controleëenheid met innovatief design werkt zowel via netstroom als batterij en biedt ruime mogelijkheden in gebruik.



### Het controlepaneel zorgt voor eenvoudig en intuïtief gebruik

Het is gemakkelijk om de informatie zoals bv. Rotatiesnelheid en batterijinhoud te volgen. Het controlepaneel is intuïtief en reduceert stress.

### LED micromotor met interne spray

De compacte micromotor werd speciaal ontwikkeld voor mobiele tandheelkunde en weegt slechts 148 g (met slang) en beschikt over interne spray en LED licht. De micromotor is mobiel maar werkt als een normale micromotor met talrijke klinische toepassingen en is compatibel met bestaande hoek- en handstukken\*1 (geen extra kosten).

\*1 Voldoet aan ISO 3964.




### Mogelijkheid tot gebruik met netstroom of op (oplaadbare) batterijen

Wanneer batterij leeg is kan je overschakelen op netstroom via AC adapter. Gemakkelijk te verplaatsen wegens kleine afmetingen van de controleëenheid (B 72 x D 180 x H 36 mm) en laag gewicht (370 g).

### Voetpedaal (optioneel)

Maakt het mogelijk om geconcentreerd te blijven op de interventie.

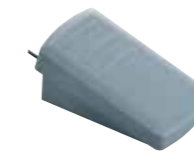

### Draagkoffer

Draagkoffer bijgeleverd voor vervoeren van VIVAMATE G5 eenheid en accessoires.



### VIVAMATE G5 Complete Set **LED**

MODEL : VIVAMATE G5 230 V SET REF : Y1002801

Inhoud  
● Bedieningseenheid ● Handstuksteun ● Motor met snoer ● AC Adapter ● AC snoer ● Draagkoffer

#### Specificaties :

Bedieningseenheid		Micromotor	
• Afmetingen	: B 72 x D 180 x H 36 (mm)	• Afmetingen	: ø22 x L 68,6 (mm)
• Gewicht	: 370 g	• Gewicht	: 148 g (Inclusief snoer)
• Opladtid batterij	: ongeveer 2 uur*	• Snelheid	: 3.000-30.000 min <sup>-1</sup>
• Continu gebruik van batterij	: ongeveer 1 uur*	• Koppel	: 3 Ncm (30.000 min <sup>-1</sup> tijdens rotatie)

\*Varieerd naargelang omstandigheden

## Gerelateerde Producten

### Hoekstukken



Voor Algemeen gebruik 1:5 Versnelling

**MET LICHT** MODEL : Z95L REF : C1034

- Max. Snelheid : 200.000 min<sup>-1</sup>
- Voor FG boren (φ1,6)
- Afm. kop : φ8,9 x H 13,4 mm
- Titanium behuizing met krasvrije DURAGRIP
- DLC-coating
- Anti-hittesysteem
- Keramische lagers
- Drukknop
- Viervoudige spray
- Microfilter
- Clean Head-systeem
- Quartzstaaf



Voor Algemeen gebruik Directe 1:1 aandrijving

**MET LICHT** MODEL : Z25L REF : C1038

- Max. Snelheid : 40.000 min<sup>-1</sup>
- Voor CA boren (φ2,35)
- Afm. kop : φ8,9 x H 13,7 mm
- Titanium behuizing met krasvrije DURAGRIP
- Drukknop
- Enkelvoudige Spray
- Microfilter
- Clean Head-systeem
- Quartzstaaf



Voor profylaxie 16:1 Reductie

**MET LICHT** MODEL : X57L REF : C609

- Max. Snelheid : 2.500 min<sup>-1</sup>
- Voor schroefbare kegeltjes en borstels
- Rotatie 360°
- Zonder spray
- Titanium behuizing met krasvrije DURACOAT
- Quartzstaaf



Rechte handstukken Directe 1:1 aandrijving

**MET LICHT** MODEL : X65L REF : H273

- Max. Snelheid : 40.000 min<sup>-1</sup>
- Enkelvoudige Spray
- Voor HP boren (φ2,35)
- Voor CA boren (φ2,35)\*
- Titanium behuizing met krasvrije DURACOAT
- Quartzstaaf

\*Bijgeleverde boorstopper inbrengen




### Diagnose Handstuk




**MET LICHT** MODEL : isoE-LUX REF : Z1265

- E-type verbinding met licht
- Quartzstaaf
- Roestvrijstaal Behuizing

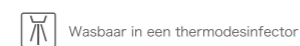

### Ultrasone Scaler Inserts

NSK biedt meer dan 70 tips om de behandeling te optimaliseren in verschillende klinische procedures.

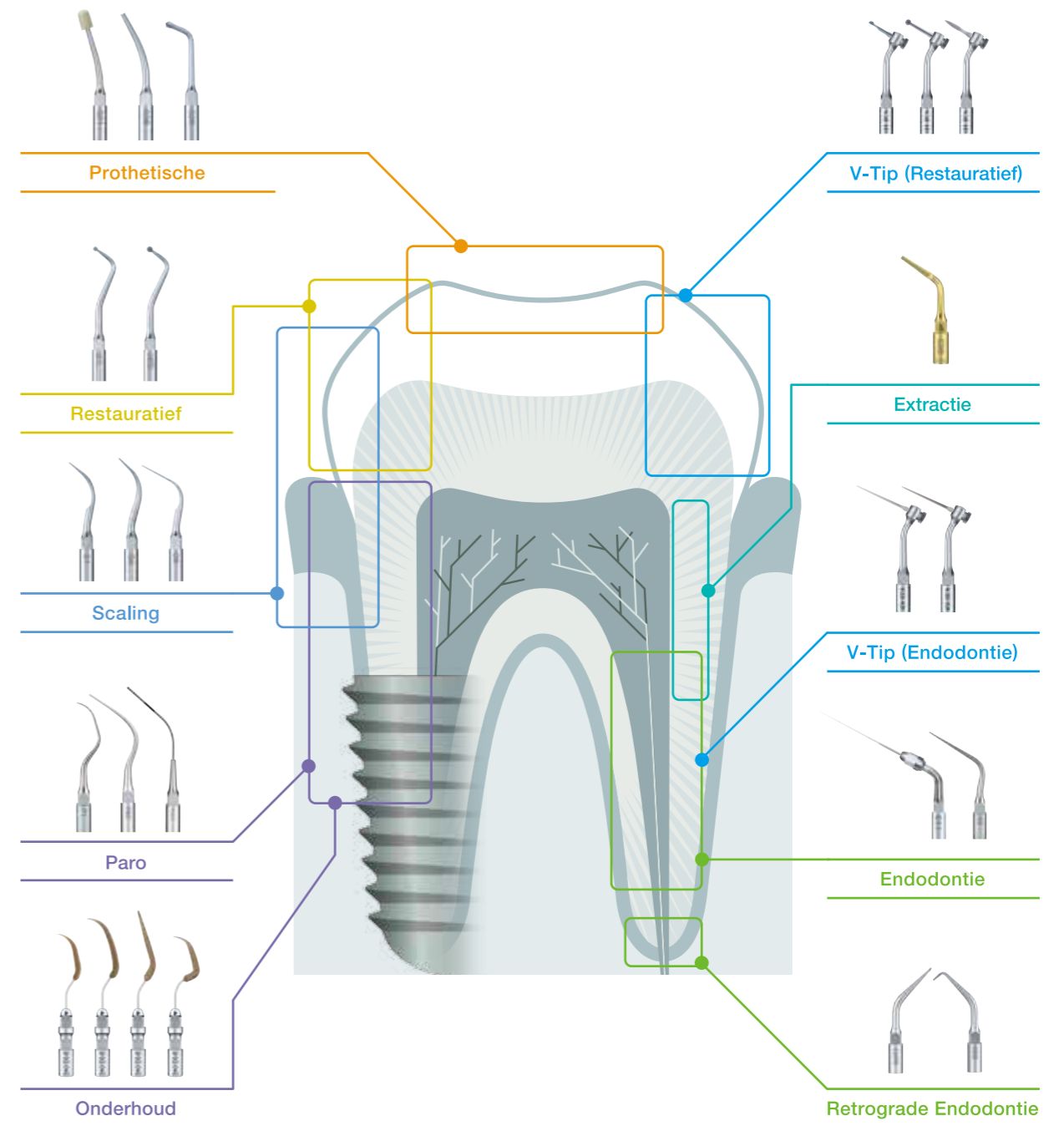

## Toebehoren en Losse Onderdelen

### Dentalone

MODEL	PRODUCTEN	REF
Aspiratieslang met koppelingen		57064-1
Aspiratiedeksel met schroeven en mounts		57068
Aspiratiefles compleet		57072
Deksel waterfles		57069
Fles voor water		57073
FC-76 Voetpedaal		Z1082

MODEL	PRODUCTEN	REF
3-F canule		37066
Speekselzuiger zeef		37064.6
Speekselzuiger adapter		37064.7
Sterilisatiecassette	 	Z1035001
Sleutel voor inserts (CR-10)	 	Z221076

### VIVAMATE G5

MODEL	PRODUCTEN	REF
VIVAMATE G5 230 V Bedieningseenheid		U1068004
VMG30EM MC VIVAMATE G5 Micromotor met snoer		E1069002
VMG30 VIVAMATE G5 Micromotor zonder snoer		E1069052
VMG30 CD VMG30 snoer motor		E1069061
FC-76M Voetbediening	 (Optioneel)	Z1082002

MODEL	PRODUCTEN	REF
Handstuksteun		Z095206
Batterijpack		Y1002886
AC Adapter Voor VIVAMATE G5		U1115
Draagset Voor VIVAMATE G5		Y1002171