



CREATE IT.

Medicina Dentária Móvel

Dentalone / VIVAMATE G5



Cuidados dentários avançados para todas as pessoas no mundo.

É óbvio que a cárie pode ser tratada. Mas mesmo no mundo atual ainda existem regiões sem acesso a saúde oral. Em áreas com dentistas nem sempre é fácil aceder a consultas na clínica, especialmente para as pessoas mais velhas e de menor mobilidade.

A NSK projetou uma unidade de tratamento portátil com a funcionalidade de uma clínica para prestar um cuidado dentário avançado aos doentes, onde quer que estejam.

Com várias ideias inovadoras, a medicina dentária móvel da NSK anuncia uma nova forma de tratamento aos pacientes.

Índice

Dentalone P 03-04

VIVAMATE G5 P 05-06

Produtos Relacionados P 07-08

Reposições / Componentes P 09



Dentalone

Unidade Dental Móvel

A Sua Ajuda em Qualquer Lugar.*

Dentalone é o carrinho dental móvel, preparado para tratamento dental ou preventivo, em assistências Humanitárias, cuidados domiciliários, Escolas, Exército e Hospitais.

Vantagens

- Compacto
- Simples de usar
- Móvel
- Sistema Conectar e Usar
- Fácil de transportar
- Amigo do utilizador
- Extensível à função de carro
- Ampla gama de funcionalidades

Características

- Todos os componentes do conjunto embalados em caixa com asa de transporte
- Equipado com unidade de controle e bandeja de instrumentos de altura ajustável para evitar problemas de posição durante o tratamento.
- Unidade completa pequena e leve
- Suporte de Instrumentos com seleção automática e de fácil posicionamento
- Compressor integrado para a irrigação e seringa
- Alimentação comutável (100 V - 230 V)



NLX nano

Micromotor Clínico Elétrico

- O micromotor mais pequeno e leve atualmente disponível.



Varios2 Lux

Escarificador Ultrassónico Multifuncional

- Peça de mão iPiezo garante potência de saída estável e desempenho.



Multi Pad

Multi-Painel de controle para o sistema de integrado

- Identificação visual no visor é possível mesmo durante o funcionamento do instrumento.

- Painel de controle LCD Iluminado Multi Pad
- Micromotor NLX nano com luz LED, 40.000 min⁻¹, esterilizável, irrigação interna e corpo de titânio
- Escarificador ultrassónico multifuncional integrado Varios 170 com luz LED, peça de mão VA2-LUX-HP fina e leve
- Seringa de 3 funções ar / água / spray com luz LED
- Completa sucção de saliva
- Depósito de água de 500 mL
- Recipiente de resíduos 1 Litro



Dentalone Conjunto Completo **LED**

MODELO : Dentalone CÓDIGO DE ENCOMENDA : S9070

Inclui :

- 1 mala de transporte ● 1 depósito de água para spray ● 1 depósito de vácuo ● Compressor integrado
- Bomba de sucção integrada ● 1 Pedal de controle variável ● 1 mesa extensível

Especificações :

Dimensões		
• Mala com rodas (pega da mala recolhida) : L 351 x C 405 x A1 545 mm		• Altura de trabalho : 766 mm
• Mala com rodas (pega da mala estendida) : L 351 x C 405 x A1 1.075 mm		• Peso com mala : 18,5 kg
• Sem mala : L 350 x C 405 x A1 496 mm		• Fonte de energia : CA 100-230V 50/60Hz

VIVAMATE G5

Unidade de Micromotor Portátil

Micromotor LED portátil; Para ajustes de próteses até aplicações gerais

A incorporação mais recente à gama VIVAMATE, o pioneiro micromotor portátil. O VIVAMATE G5 oferece várias funções que satisfazem as necessidades dos profissionais na sua prática de odontologia móvel. Assim a nova unidade de controlo com o seu inovador desenho destaca uma alta portabilidade e operatividade, já que pode funcionar com bateria ou alimentação elétrica.



Painel de controle simples e operação intuitiva

Informação necessária é fácil e visível, como velocidade de rotação, ligar/desligar e nível de bateria. Painel de controle grande e intuitivo reduz o stress do profissional

Micromotor LED com spray interno

O micromotor compacto foi desenvolvido especificamente para a medicina dentária móvel, pesa apenas 148 g (com cabo) e dispõe de spray interno e de luz LED. Apesar de completamente portátil, tem um desempenho similar ao de um sistema cirúrgico fixo, cumprindo uma vasta gama de requisitos clínicos e sendo completamente compatível com os seus contra ângulos e peças de mão retas*1 para ajudar a gerir o custo de uma instalação de medicina dentária móvel.



*1 Em conformidade com a norma ISO 3964.




Unidade de controle funciona com alimentação por bateria recarregável ou adaptador AC

Capaz de operar com baterias recarregáveis em qualquer lugar. Quando o nível de bateria estiver fraco, basta conectar o adaptador AC na tomada; Pode ser transportado com facilidade até ao paciente sem nenhum problema. É muito fácil de levar visto caber na palma da mão (L 72 x C 180 x A1 36 mm) e pesa apenas 370 g.

Pedal de Controlo (Opcional)

Regule facilmente a velocidade do motor carregando no pedal de controlo sem retirar os olhos do tratamento.

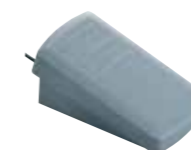

Mala de Transporte

Inclui mala de transporte para guardar a unidade VIVAMATE G5 e os acessórios.



Conjunto Completo VIVAMATE G5



MODELO : VIVAMATE G5 230 V SET CÓDIGO DE ENCOMENDA : Y1002801

Inclui :
● Unidade de Controlo ● Suporte de micromotor ● Micromotor com Cabo ● Transformador CA
● Cabo CA ● Mala de Transporte

Especificações :

Unidade de Controlo		Micromotor	
• Dimensões	: L 72 x C 180 x A1 36 (mm)	• Dimensões	: ø22 x L 68,6 (mm)
• Peso	: 370 g	• Peso	: 148 g (incluindo o cabo do motor)
• Tempo de recarga da bateria	: aprox. 2 horas.*	• Velocidade	: 3.000 - 30.000 min ⁻¹
• Tempo de funcionamento contínuo da bateria	: aprox. 1 hora.*	• Binário	: 3 Ncm (30.000 min ⁻¹)

*Varia com as condições de utilização.

Produtos Relacionados

Contra Ângulo



Para Aplicação Geral 1:5 Multiplicador

COM LUZ MODELO : Z95L CÓDIGO DE ENCOMENDA : C1034

- Velocidade Máxima : 200.000 min⁻¹
- Para brocas FG (φ1,6)
- Tamanho da Cabeça : φ8,9 x H 13,4 mm
- Corpo de Titânio com DURAGRIP Resistente a Arranhões
- Revestimento DLC
- Sistema Anti-aquecimento
- Rolamentos de Cerâmica
- Sistema de fixação Push Botton
- Quatro Sprays
- Microfiltro
- Sistema de Cabeça Limpa
- Óptica de Vidro Celular



Para Aplicação Geral 1:1 Transmissão Direta

COM LUZ MODELO : Z25L CÓDIGO DE ENCOMENDA : C1038

- Velocidade Máxima : 40.000 min⁻¹
- Para brocas CA (φ2,35)
- Tamanho da Cabeça : φ8,9 x H 13,7 mm
- Corpo de Titânio com DURAGRIP Resistente a Arranhões
- Sistema de fixação Push Botton
- Spray Simples
- Microfiltro
- Sistema de Cabeça Limpa
- Óptica de Vidro Celular



Para Aplicação Profilática 16:1 Redução

COM LUZ MODELO : X57L CÓDIGO DE ENCOMENDA : C609

- Velocidade Máxima : 2.500 min⁻¹
- Para taças e escovas de enroscar
- Rotação de 360°
- Sem spray de água
- Corpo de Titânio com DURACOAT Resistente a Arranhões
- Óptica de Vidro Celular



Peça de Mão Reta 1:1 Transmissão Direta

COM LUZ MODELO : X65L CÓDIGO DE ENCOMENDA : H273

- Velocidade Máxima : 40.000 min⁻¹
- Spray Simples
- Para brocas HP (φ2,35)
- Para brocas CA (φ2,35)*
- Corpo de Titânio com DURACOAT Resistente a Arranhões
- Óptica de Vidro Celular

*Necessita inserir o topo da broca, facilitado com a peça de mão







Sonda de Luz




COM LUZ MODELO : isoE-LUX CÓDIGO DE ENCOMENDA : Z1265

- Conexão a micromotor Tipo-E
- Óptica de Vidro Celular
- Corpo de Aço Inoxidável

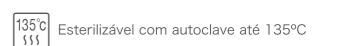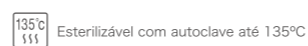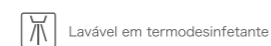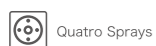

Pontas Escarificação Ultrassônica

NSK oferece mais de 70 pontas de esarificador ultrassônico para vários procedimentos clínicos.

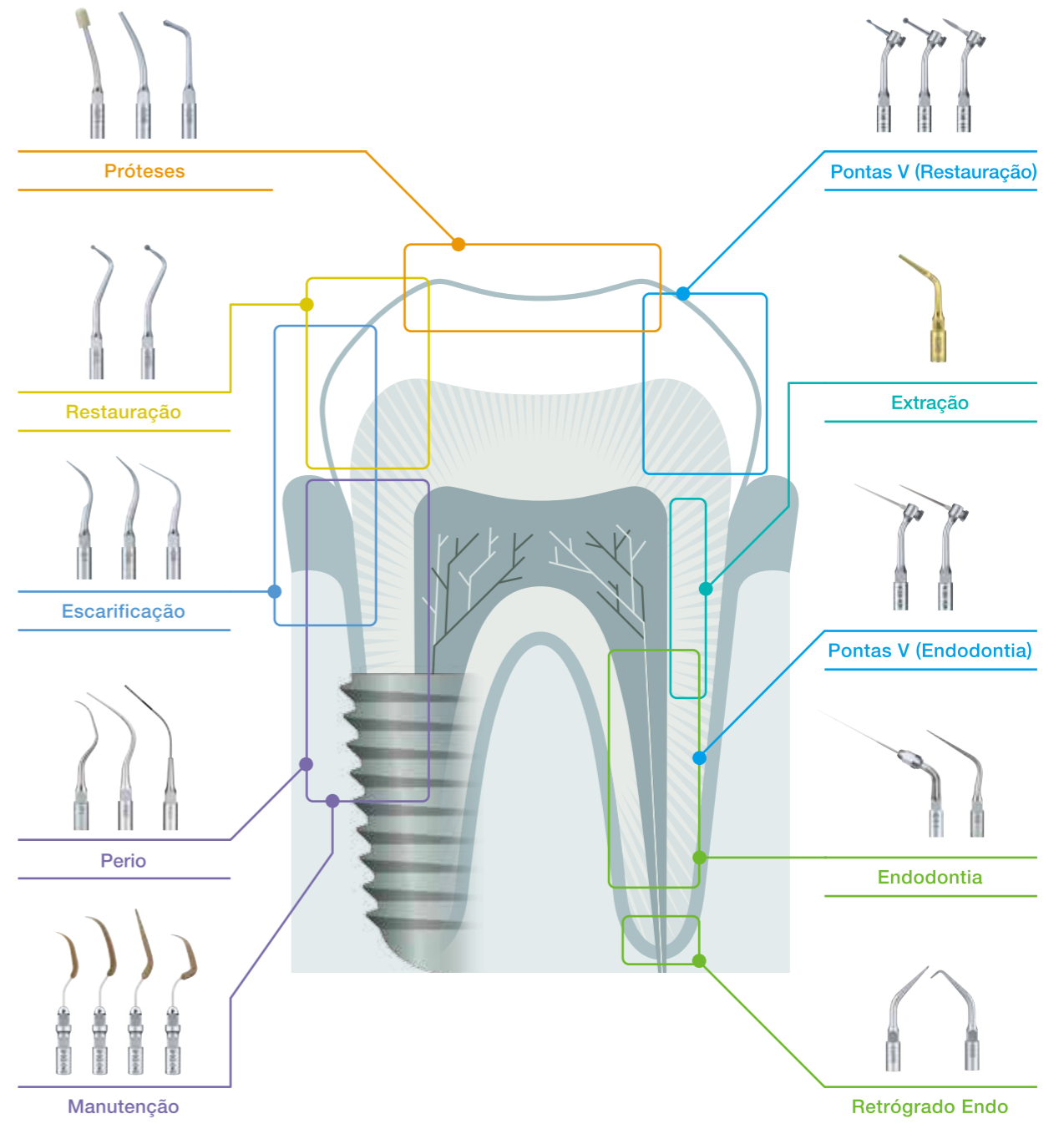

Reposições / Componentes

Dentalone

MODELO	PRODUTO	CÓDIGO DE ENCOMENDA
Ejetor de saliva com mangueira e conector		57064-1
Tampa de enroscar de sucção, montada		57068
Garrafa de sucção completa		57072
Tampa de enroscar para água, montada		57069
Garrafa de água completa		57073
FC-76 Pedal de controlo		Z1082

MODELO	PRODUTO	CÓDIGO DE ENCOMENDA
Ponta da seringa		37066
Filtro injetor de saliva		37064.6
Adaptador ejetor de saliva		37064.7
Caixa de esterilização	 	Z1035001
Chave para Ponta (CR-10)	 	Z221076

VIVAMATE G5

MODELO	PRODUTO	CÓDIGO DE ENCOMENDA
VIVAMATE G5 230 V Unidade de Controlo		U1068004
VMG30EM MC VIVAMATE G5 Micromotor com Cabo		E1069002
VMG30 VIVAMATE G5 Micromotor		E1069052
VMG30 CD VMG30 Cabo Motor		E1069061
FC-76M Pedal de controlo	 (Opcional)	Z1082002

MODELO	PRODUTO	CÓDIGO DE ENCOMENDA
Suporte de Micromotor		Z095206
Bateria		Y1002886
Transformador CA Para VIVAMATE G5		U1115
Mala de Transporte Para VIVAMATE G5		Y1002171